


OPCIONAIS

BOLSA

Prática bolsa personalizada que permite o carregamento da balança quando utilizada em campo.

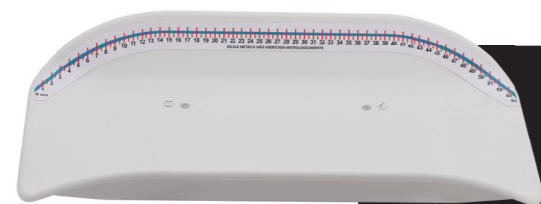

CONCHA ANATÔMICA ANTROPOMÉTRICA

Réguas antropométrica que pode medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm.

CONCHA ANATÔMICA EM AÇO INOXIDÁVEL

Construída em aço inoxidável, imune a oxidação, para aplicações especiais.



BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL

Bateria interna com autonomia para até 100 horas. (Tempo de recarga de 8 horas com uso contínuo a ser ligado na rede elétrica. Possui indicador "bargrap" que aponta o nível de carga durante o uso).



CONEXÃO INTERFACE SERIAL

Para impressão com etiquetador BALMAK ou conexão com PC (e sistemas). Protocolo de comunicação: Tipo Serial padrão RS-232 (ERD/ETD). Conector DB-9. Protocolo Usual STX...ETX.



balmak | **30**
ANOS

Presente nas suas melhores escolhas!

f @ /balmakbalancas

balmak.com.br

Catálogo Baby Care (REV1, março 2023) - A Balmak segue uma política de contínuo desenvolvimento de seus produtos, reservando-se ao direito de alterar especificações e equipamentos a qualquer momento, sem prévio aviso, declinando toda responsabilidade por eventuais alterações, erros ou omissões que se verifiquem neste catálogo.

amplitude

Baby Care

Balança digital para pesar e medir bebês



ELP-25BB Baby Care

balmak

Baby Care

Balança digital para pesar e medir bebês

ELP-25BB Baby Care

DESIGN
MODERNO

CAPA ALMOFADADA

Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis.



FONTE
DE ENERGIA



DISPLAY LCD
COM BACKLIGHT

PÉS COM
REGULAGEM
DE ALTURA



FUNÇÃO
TARA



CAPACIDADE	25kg, com dupla escala, sendo: 2g até 10,000kg e 5g de 10,005g até 25,000kg
ALIMENTAÇÃO	Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V / 1A
DISPLAY OPERADOR	LCD (cristal líquido) com backlight, de baixo consumo energético
CONCHA ANATÔMICA	Em polipropileno injetado na cor extra branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês).
GABINETE	Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade.
TECLADO (E PAINEL DA BALANÇA)	Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais.
FUNÇÕES DO TECLADO	Liga/desliga, Tara (máx. 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite passagem descontando o peso de travesseiros, fraldas cobertores, etc.
BUZZER SONORO	Sonorização de teclas durante a digitação.
PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA	Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens.
DIMENSÕES	Gabinete: 33,5L x 33,58P x 11,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm.
PESO DA BALANÇA	2,750kg + 0,500kg versão bat Peso de embarque da balança 3,750kg + 0,500kg versão bat
CONSUMO	03W ou 7W durante a recarga da bateria (quando houver).
FUNÇÃO ECO	A BaBy Care apresenta recurso tecnológico que economiza energia reduzindo a intensidade da iluminação dos displays, após alguns segundos com a balança em zero. A iluminação (<i>backlight</i>) é totalmente reativada no momento em que a balança estiver em operação de pesagem.
GARANTIA	1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação.